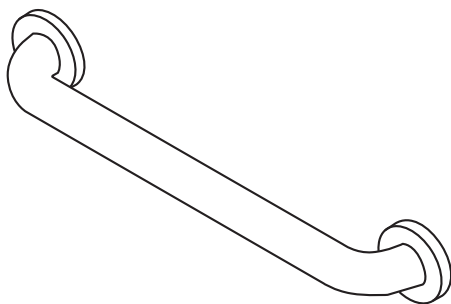


The Amazon Basics logo, featuring the word "amazon" in a lowercase sans-serif font with a curved arrow underneath it, followed by the word "basics" in a similar font.

Bathroom Handicap Grab Bar

Barre d'Appui De Salle De Bain

Badezimmer-Haltestange

Maniglione di Sostegno Per Bagno

Barra De Sujeción Para Baño Adaptado

障害者用バスルームグリップバー

浴室无障碍扶手

**B079LL22TC, B079LD8CRV, B079LL5FB2, B079LKHXTV,
B079L7MRD9, B079LL4527, B079L9X9L4, B079L7MXTK,
B079LKQNP, B079L9X9LJ, B079L7MRDY, B079L6LY1V,
B079LL452W, B079LJZF95, B079LKNJT9, B079L9X9M4,
B079L6LY25, B079L9TH6V**

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

中文

English	3
Français	10
Deutsch.....	17
Italiano	24
Español	31
日本語	38
中文	45

Welcome Guide • English

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


日本語

中文

Bathroom Handicap Grab Bar

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

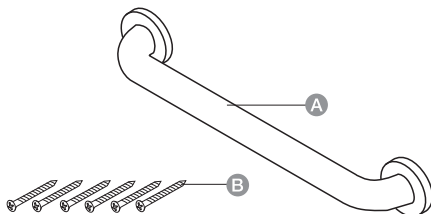

Part	Description	Quantity
A	Grab bar	1
B	Mounting screws #10 x 2 in. stainless steel	6


Required Tools

	Safety glasses		Stud finder
	Pencil		1/8" Drill bit
	Level		Phillips screwdriver
	Power drill		Silicon sealant
	Measuring tape		

Installation

Step 1:

Remove Grab Bar Covers

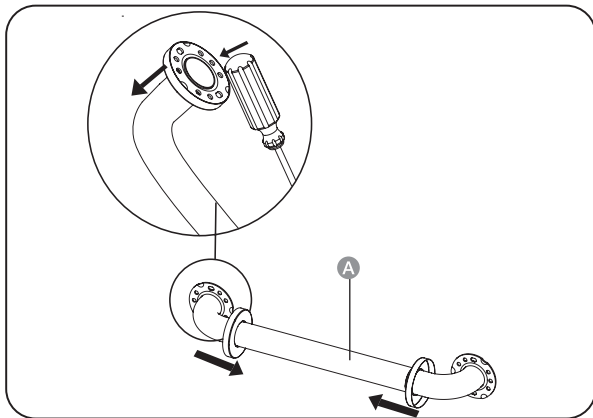


- **IMPORTANT:** Remember to mount all screws firmly into a wood stud. Use a stud finder to locate the center point of the stud. Studs are usually 16 inches on center.
- Loosen the grab bar covers from the base by gently twisting and tapping from the bottom of the mounting base.




Installation

Step 2:

Locate Stud(s) And Position Grab Bar

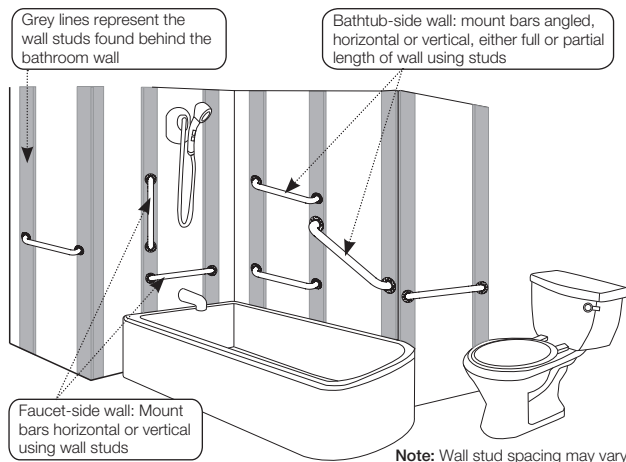

- Use a stud finder to locate the center point of the stud. Studs are usually 16 inches on center.

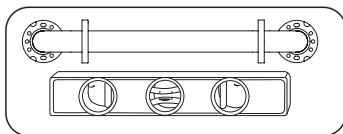


- Using a level, place the grab bar on the wall in your desired location. Ensure that the mounting holes are positioned over a wood stud.

Installation

Step 3:


Mark Mounting Location

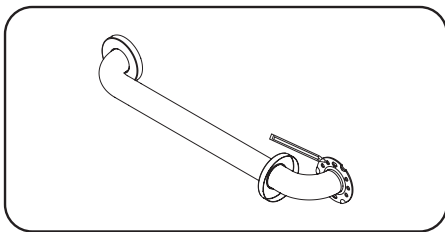

- Using a pencil, mark the screw mounting locations.

Step 4:

Drill Screw Mounting Holes

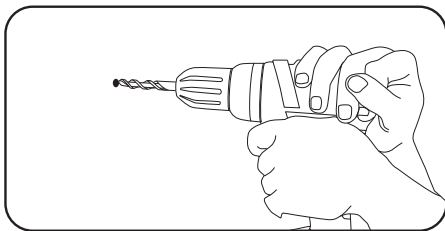


- Place grab bar aside and drill pilot holes as marked by your penciled locations.

- **IMPORTANT:** Ensure holes are drilled into wood stud.



Step 5: Mount Grab Bar

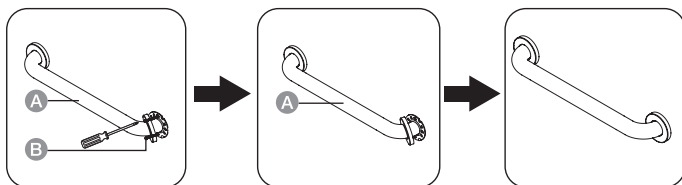

- Mount the grab bar using a Phillips screw driver. Ensure that the screws are tightly fastened into a wood stud.
- Slide the grab bar covers overtop the mounting plates and snap them into place. If desired, apply Silicon sealant or caulk to the backside of grab bar covers to prevent water infiltration.

Safety Information



- **WARNING:** To reduce the risk of injury, thoroughly read and understand all safety information and instructions provided in this manual. If you do not understand any of the safety information or installation instructions contact a professional for assistance before attempting to install.
- **WARNING:** Install in accordance with these instructions only. Do not attempt to modify or alter this product. After installation, check your grab bar periodically to ensure all screws are tight. Retighten if loose.
- **IMPORTANT:** Mount the grab bar(s) to a secure surface. The manufacture will not accept responsibility for any injury or any damages cause by the lack of wall strength or improper installation.
- **WARNING:** All screws must be mounted directly and firmly into a wood stud. Locate the middle of the stud by using a stud finder or other stud finding method (Studs are usually 16" on center).

Follow instructions along with line drawings in the AmazonBasics installation guide.

Specifications

B079LL22TC	12 Inch	1.25 Inch Diameter
B079LD8CRV	16 Inch	1.25 Inch Diameter
B079LL5FB2	18 Inch	1.25 Inch Diameter
B079LKHXTV	24 Inch	1.25 Inch Diameter
B079L7MRD9	30 Inch	1.25 Inch Diameter
B079LL4527	32 Inch	1.25 Inch Diameter
B079L9X9L4	36 Inch	1.25 Inch Diameter
B079L7MXTK	42 Inch	1.25 Inch Diameter
B079LKQNP	48 Inch	1.25 Inch Diameter
B079L9X9LJ	12 Inch	1.5 Inch Diameter
B079L7MRDY	16 Inch	1.5 Inch Diameter
B079L6LY1V	18 Inch	1.5 Inch Diameter
B079LL452W	24 Inch	1.5 Inch Diameter
B079LJZF95	30 Inch	1.5 Inch Diameter
B079LKNJT9	32 Inch	1.5 Inch Diameter
B079L9X9M4	36 Inch	1.5 Inch Diameter
B079L6LY25	42 Inch	1.5 Inch Diameter
B079L9TH6V	48 Inch	1.5 Inch Diameter

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



For US - Visit amazon.com/AmazonBasics/Warranty

For UK - Visit amazon.co.uk/basics-warranty

— or —



Contact Customer Service at 1-866-216-1072

Feedback

Love it? Hate it?

Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

Please visit: amazon.com/review/review-your-purchases#



For further services:



Visit amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— or —



Contact Customer Service at 1-866-216-1072

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語


中文

Guide de Bienvenue • Français

Barre d'Appui De Salle De Bain

Contenu :

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

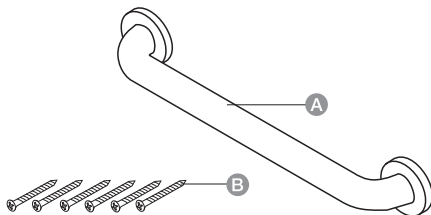

Composant	Description	Quantité
A	Barre d'appui	1
B	Vis de montage #10 x 5,1 cm en acier inoxydable	6


Outils Nécessaires

	Lunettes de protection		Détecteur de montants
	Crayon		Foret de 1/8"
	Niveau		Tournevis Philips
	Perceuse électrique		Scellant en silicone
	Mètre-ruban		

Installation

Étape 1 :

Retirez Les Caches De La Barre d'Appui

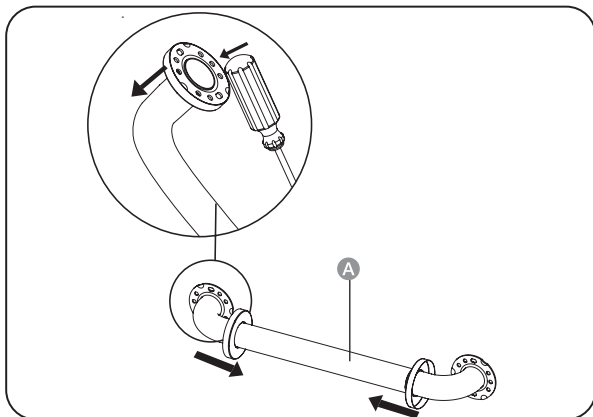

- **IMPORTANT :** N'oubliez pas de bien serrer toutes les vis sur un montant en bois. Localisez le point central du montant à l'aide d'un détecteur de montants. Les centres des montants se situent généralement à 40,6 cm les uns des autres.
- Désserrez les caches de la base de la barre d'appui en les tournant et en les tapotant doucement à partir de la partie inférieure de la base de montage.



English

Français

Deutsch

Italiano

Español


日本語

中文


Installation

Étape 2 :

Localiser Le(s) Montant(s) et Positionner la Barre d'Appui

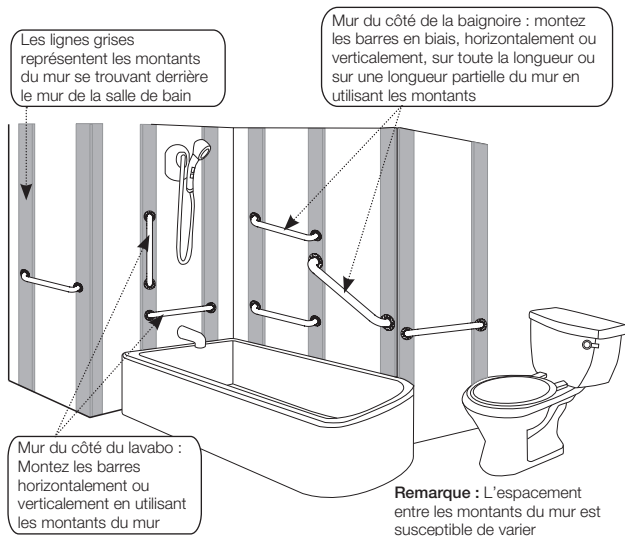

- Localisez le point central du montant à l'aide d'un détecteur de montants. Les centres des montants se situent généralement à 40,6 cm les uns des autres.

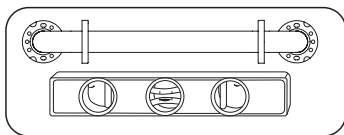


- À l'aide d'un niveau, placez la barre d'appui contre le mur à l'endroit souhaité. Veillez à ce que les trous de montage soient bien positionnés sur un montant en bois.

Installation

Étape 3 :


Marquer l'Emplacement De Montage

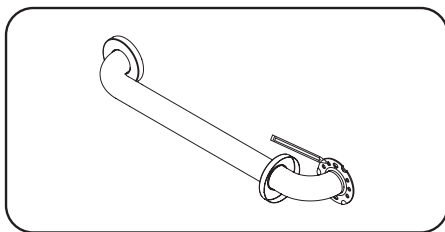

- À l'aide d'un crayon, marquez les emplacements de montage des vis.

Étape 4 :


Percer Les Trous De Montage Des Vis

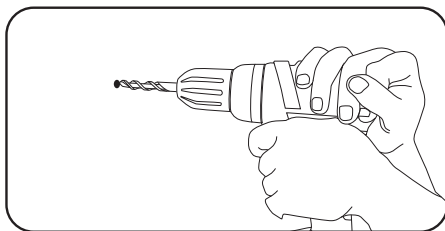

- Mettez la barre d'appui de côté, puis percez les trous de guidage aux emplacements que vous avez marqués au crayon.
- **IMPORTANT** : Assurez-vous que les trous sont bien percés dans un montant en bois.



Étape 5 : Montage De La Barre d'Appui

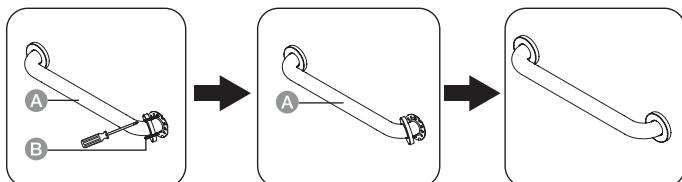

- Montez la barre d'appui à l'aide d'un tournevis Philips. Assurez-vous que les vis sont solidement serrées dans un montant en bois.
- Faites glisser les caches de la barre d'appui sur le dessus des plaques de montage, et enclenchez-les en place. Si vous le souhaitez, appliquez un scellant en silicone ou un mastic au dos des caches de la barre d'appui, afin de prévenir toute infiltration d'eau.

Informations Relatives à la Sécurité



- **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire tout risque de blessures, lisez et assimilez l'ensemble des informations relatives à la sécurité et des instructions fournies dans le présent manuel. En cas de doutes concernant toute information relative à la sécurité ou toute instruction d'installation, prenez contact avec un professionnel afin d'obtenir de l'aide avant de commencer l'installation.
- **AVERTISSEMENT** : Installez le produit conformément aux présentes instructions uniquement. Ne pas tenter de modifier ou d'altérer le produit. Après l'installation, vérifiez régulièrement l'état de votre barre d'appui afin de vous assurer que toutes les vis sont bien serrées. Resserrez-les si elle sont desserrées.
- **IMPORTANT** : Montez la/les barre(s) d'appui sur une surface stable. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages occasionnés par un mur trop fragile ou par une installation incorrecte.
- **AVERTISSEMENT** : Toutes les vis doivent être montées directement et solidement dans un montant en bois. Localisez le centre du montant à l'aide d'un détecteur de montants ou de toute autre méthode de détection des montants (les centres des montants se situent généralement à 40,6 cm les uns des autres).

Suivez les instructions ainsi que les schémas du guide d'installation AmazonBasics.

Caractéristiques

B079LL22TC	30,5 cm	3,2 cm de diamètre
B079LD8CRV	40,6 cm	3,2 cm de diamètre
B079LL5FB2	45,7 cm	3,2 cm de diamètre
B079LKHXTV	61 cm	3,2 cm de diamètre
B079L7MRD9	76,2 cm	3,2 cm de diamètre
B079LL4527	81,3 cm	3,2 cm de diamètre
B079L9X9L4	91,4 cm	3,2 cm de diamètre
B079L7MXTK	106,7 cm	3,2 cm de diamètre
B079LKQNP	121,9 cm	3,2 cm de diamètre
B079L9X9LJ	30,5 cm	3,8 cm de diamètre
B079L7MRDY	40,6 cm	3,8 cm de diamètre
B079L6LY1V	45,7 cm	3,8 cm de diamètre
B079LL452W	61 cm	3,8 cm de diamètre
B079LJZF95	76,2 cm	3,8 cm de diamètre
B079LKNJT9	81,3 cm	3,8 cm de diamètre
B079L9X9M4	91,4 cm	3,8 cm de diamètre
B079L6LY25	106,7 cm	3,8 cm de diamètre
B079L9TH6V	121,9 cm	3,8 cm de diamètre

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :



Veillez visiter amazon.fr/basics-garantie

— ou —



Contactez le service clients au 08 00 94 77 15

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

中文

Vos Avis

Vous l'adorez ? Vous le détestez ?

Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

Veuillez visiter : amazon.fr/review/review-your-purchases#



Pour obtenir d'autres services :



Veuillez visiter amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

— ou —



Contactez le service clients au 08 00 94 77 15

Bedienungsanleitung • Deutsch

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


日本語

中文

Badezimmer-Haltestange

Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

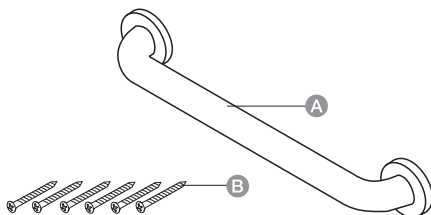

Teil	Beschreibung	Menge
A	Haltestange	1
B	Befestigungsschrauben #10 x 5,1 cm, rostfreier Stahl	6


Erforderliches Werkzeug

	Sicherheitsbrille		Balkensucher
	Bleistift		1/8" Bohrer
	Wasserwaage		Kreuzschlitzschraubendreher
	Bohrmaschine		Silikondichtmittel
	Maßband		

Installation

Schritt 1:

Entfernen der Abdeckungen von der Haltestange

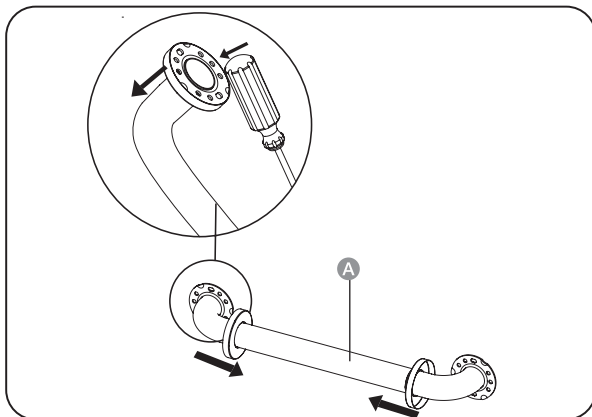


- **WICHTIG:** Denken Sie daran, alle Schrauben fest in einem Holzbalken zu montieren. Verwenden Sie einen Balkensucher, um den Mittelpunkt des Balkens zu lokalisieren. Balken haben üblicherweise einen Abstand von 40,6 Zentimetern.
- Lösen Sie die Abdeckungen der Haltestange durch leichtes Drehen und Klopfen von der Unterseite der Montageplatte.




Installation

Schritt 2:

Lokalisieren von Balken und Positionieren der Haltestange

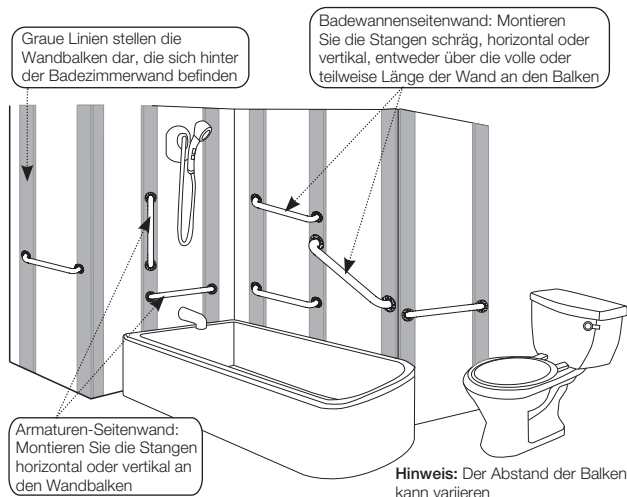

- Verwenden Sie einen Balkensucher, um den Mittelpunkt des Balkens zu lokalisieren. Balken haben üblicherweise einen Abstand von 40,6 Zentimetern.

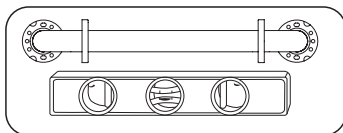

- Platzieren Sie die Haltestange an der gewünschten Position an der Wand und verwenden Sie eine Wasserwaage. Achten Sie darauf, dass die Befestigungslöcher über einem Holzbalken liegen.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


日本語

中文

Installation

Schritt 3:


Markieren der Montageposition

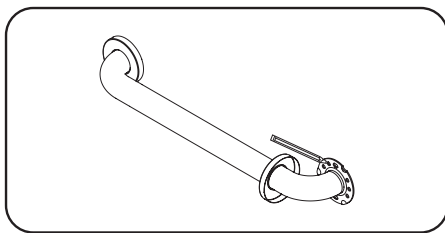

- Markieren Sie die Schraubstellen mit einem Bleistift.

Schritt 4:


Bohren der Montagelöcher

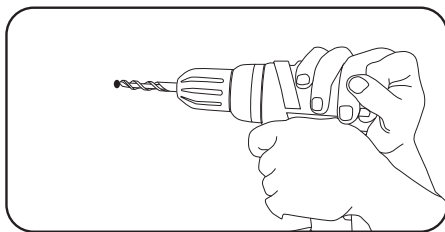

- Legen Sie die Haltestange beiseite und bohren Sie Löcher vor, deren Position Sie zuvor mit einem Bleistift markiert haben.
- **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass die Löcher in Holzbalken gebohrt werden.



Schritt 5: Befestigung der Haltestange

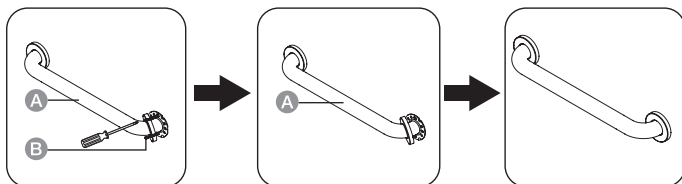

- Befestigen Sie die Haltestange mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest in einem Holzbalken befestigt sind.
- Schieben Sie die Abdeckungen der Haltestange über die Montageplatten und lassen Sie sie einrasten. Falls gewünscht, tragen Sie Silikondichtmittel oder Dichtungsmasse auf die Rückseite der Haltestangen-Abdeckungen auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Sicherheitshinweise



- **WARNUNG:** Um die Verletzungsgefahr zu verringern, sollten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig lesen und verstehen. Wenn Sie die Sicherheitshinweise oder Installationsanweisungen nicht verstehen, wenden Sie sich an einen Fachmann, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- **WARNUNG:** Installieren Sie das Produkt ausschließlich dieser Anleitung entsprechend. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verändern. Überprüfen Sie Ihre Haltestange nach der Installation regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest, wenn sie locker sind.
- **WICHTIG:** Befestigen Sie die Haltestange(n) an einem sicheren Untergrund. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die durch mangelnde Wandstärke oder unsachgemäße Installation verursacht werden.
- **WARNUNG:** Alle Schrauben müssen direkt und fest in einem Holzbalken angebracht werden. Lokalisieren Sie die Mitte des Balkens mit einem Balkensucher oder einer anderen Methode der Balkenfindung (Balken haben üblicherweise einen Abstand von 40,6 Zentimetern).

Folgen Sie den Anweisungen und den Linienzeichnungen in der AmazonBasics Installationsanleitung.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

中文

Technische Daten

B079LL22TC	30,5 cm	3,2 cm Durchmesser
B079LD8CRV	40,6 cm	3,2 cm Durchmesser
B079LL5FB2	45,7 cm	3,2 cm Durchmesser
B079LKHXTV	61 cm	3,2 cm Durchmesser
B079L7MRD9	76,2 cm	3,2 cm Durchmesser
B079LL4527	81,3 cm	3,2 cm Durchmesser
B079L9X9L4	91,4 cm	3,2 cm Durchmesser
B079L7MXTK	106,7 cm	3,2 cm Durchmesser
B079LKQNP	121,9 cm	3,2 cm Durchmesser
B079L9X9LJ	30,5 cm	3,8 cm Durchmesser
B079L7MRDY	40,6 cm	3,8 cm Durchmesser
B079L6LY1V	45,7 cm	3,8 cm Durchmesser
B079LL452W	61 cm	3,8 cm Durchmesser
B079LJZF95	76,2 cm	3,8 cm Durchmesser
B079LKNJT9	81,3 cm	3,8 cm Durchmesser
B079L9X9M4	91,4 cm	3,8 cm Durchmesser
B079L6LY25	106,7 cm	3,8 cm Durchmesser
B079L9TH6V	121,9 cm	3,8 cm Durchmesser

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter



Besuchen Sie amazon.de/basics-garantie

— oder —



Wenden Sie sich an den Kundendienst unter 08 00-3 63 84 69

Feedback

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht?

Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.

Bitte besuchen Sie: amazon.de/review/review-your-purchases#



Möchten Sie mehr wissen?



Besuchen Sie amazon.de/gp/help/customer/contact-us

— oder —



Wenden Sie sich an den Kundendienst unter 08 00-3 63 84 69

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語


中文

Guida di Benvenuto • Italiano

Maniglione di Sostegno Per Bagno

Contenuto:

Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

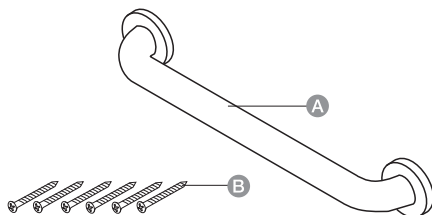

Pezzo	Descrizione	Quantità
A	Maniglione di sostegno	1
B	Viti di montaggio #10 x 5,1 cm in acciaio inossidabile	6


Strumenti Richiesti

	Occhiali protettivi		Rilevatore di montanti
	Matita		Punta da trapano da 1/8"
	Livella		Cacciavite Philips
	Trapano elettrico		Sigillante siliconico
	Metro a nastro		

Installazione

Passo 1:

Rimuovere Le Coperture Del Maniglione Di Sostegno

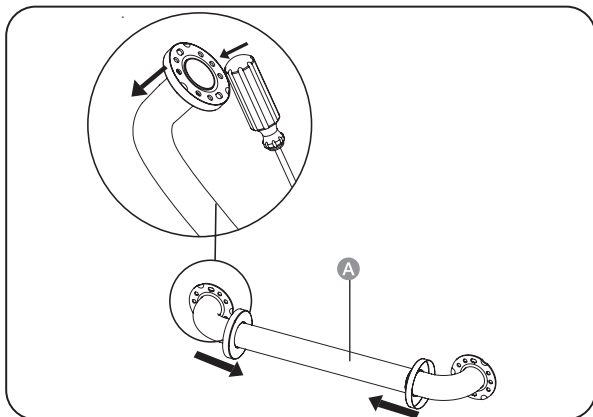

- **IMPORTANTE:** ricordarsi di montare tutte le viti saldamente in un montante in legno. Usare un rilevatore di montanti per individuare il punto centrale del montante. La distanza tra il punto centrale di due montanti è generalmente 40,6 cm.
- Allentare le coperture del maniglione di sostegno dalla base ruotando e picchiando delicatamente dal fondo della base di montaggio.



English

Français

Deutsch

Italiano

Español


日本語

中文


Installazione

Passo 2:

Individuare i Montanti e Posizionare il Maniglione di Sostegno

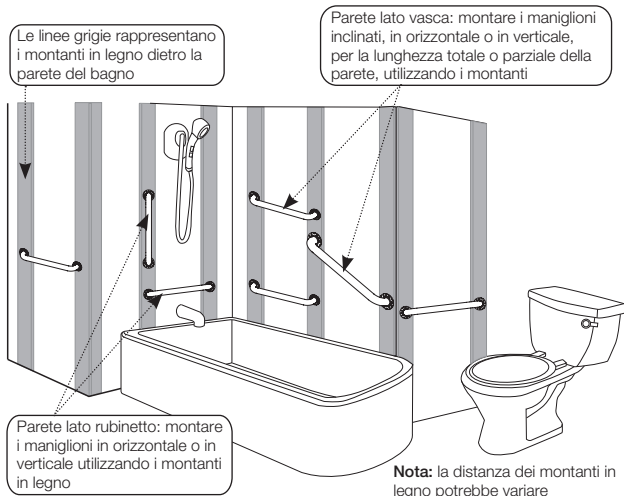

- Usare un rilevatore di montanti per individuare il punto centrale del montante. La distanza fra i centri dei due montanti è generalmente 40,6 cm.

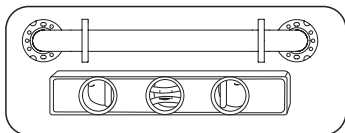


- Usando una livella, posizionare il maniglione di sostegno sulla parete alla posizione desiderata. Assicurarsi che i fori di montaggio siano posizionati su un montante in legno.

Installazione

Passo 3:


Segnare la Posizione di Montaggio

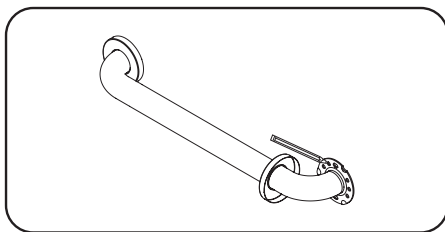

- Usando una matita, segnare le posizioni delle viti di montaggio.

Passo 4:


Praticare i Fori Delle Viti di Montaggio

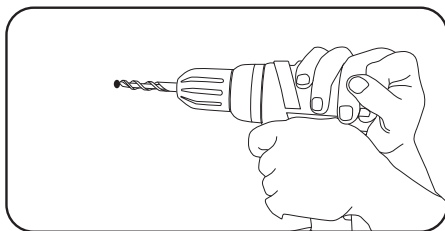

- Mettere da parte il maniglione di sostegno e praticare i fori pilota nelle posizioni segnate con la matita.
- **IMPORTANTE:** assicurare che i fori siano praticati nel montante in legno.



Passo 5: Montare il Maniglione di Sostegno

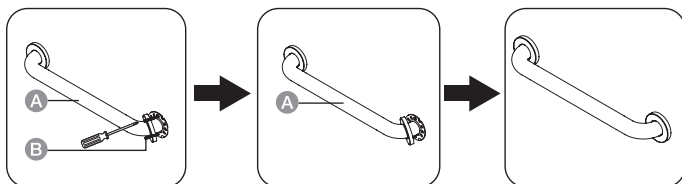

- Montare il maniglione di sostegno utilizzando un cacciavite Philips. Assicurarsi che le viti siano serrate saldamente in un montante in legno.
- Far scorrere le coperture del maniglione di sostegno al di sopra delle piastre di montaggio e premere per fissarle in posizione. Se si desidera, applicare sigillante silconico o di altro tipo sul retro delle coperture del maniglione di sostegno per prevenire infiltrazioni d'acqua.

Informazioni Sulla Sicurezza



- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di lesioni, leggere e comprendere attentamente tutte le informazioni e le istruzioni per la sicurezza fornite in questo manuale. In caso di dubbi in merito a qualsiasi informazione di sicurezza o istruzione di installazione, contattare un professionista per richiedere assistenza prima del montaggio.
- **AVVERTENZA:** installare esclusivamente in accordo a queste istruzioni. Non tentare di modificare o alterare il prodotto. Dopo l'installazione, controllare il maniglione di sostegno periodicamente per assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate. Stringere di nuovo se allentate.
- **IMPORTANTE:** montare i maniglioni di sostegno su una superficie resistente. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per lesioni o danni causati dall'installazione su pareti non adeguatamente resistenti o da un'installazione impropria.
- **AVVERTENZA:** tutte le viti devono essere montate direttamente e saldamente in un montante in legno. Individuare il centro del montante utilizzando l'apposito rilevatore o un altro metodo di rilevazione dei montanti (La distanza tra il punto centrale di due montanti è generalmente 40,6 cm).

Seguire le istruzioni a fianco dei tratteggi nella guida all'installazione AmazonBasics.

Specifiche

B079LL22TC	30,5 cm	Diametro 3,2 cm
B079LD8CRV	40,6 cm	Diametro 3,2 cm
B079LL5FB2	45,7 cm	Diametro 3,2 cm
B079LKHXTV	61 cm	Diametro 3,2 cm
B079L7MRD9	76,2 cm	Diametro 3,2 cm
B079LL4527	81,3 cm	Diametro 3,2 cm
B079L9X9L4	91,4 cm	Diametro 3,2 cm
B079L7MXTK	106,7 cm	Diametro 3,2 cm
B079LKQNP	121,9 cm	Diametro 3,2 cm
B079L9X9LJ	30,5 cm	Diametro 3,8 cm
B079L7MRDY	40,6 cm	Diametro 3,8 cm
B079L6LY1V	45,7 cm	Diametro 3,8 cm
B079LL452W	61 cm	Diametro 3,8 cm
B079LJZF95	76,2 cm	Diametro 3,8 cm
B079LKNJT9	81,3 cm	Diametro 3,8 cm
B079L9X9M4	91,4 cm	Diametro 3,8 cm
B079L6LY25	106,7 cm	Diametro 3,8 cm
B079L9TH6V	121,9 cm	Diametro 3,8 cm

Informazioni Di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:



Visita amazon.de/basics-garantie

— o —



Contattare il Servizio Clienti al 800 62 88 05

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

中文

Feedback

Ti piace? Oppure no?

Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.

Visitare: amazon.it/review/review-your-purchases



Per ulteriori servizi:



Visita amazon.it/gp/help/customer/contact-us

— o —




Contattare il Servizio Clienti al 800 62 88 05

Barra De Sujeción Para Baño Adaptado

Contenido:

Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

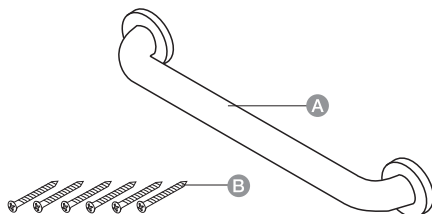

Componente	Descripción	Cantidad
A	Barra de sujeción	1
B	Tornillos de montaje #10 x 5,1 cm, acero inoxidable	6


Herramientas Necesarias

	Gafas de protección		Detector de vigas
	Lápiz		Broca de 1/8"
	Nivel		Destornillador Phillips
	Taladro eléctrico		Silicona sellante
	Cinta métrica		

Instalación

Paso 1:

Retirar Las Tapas de la Barra de Sujeción

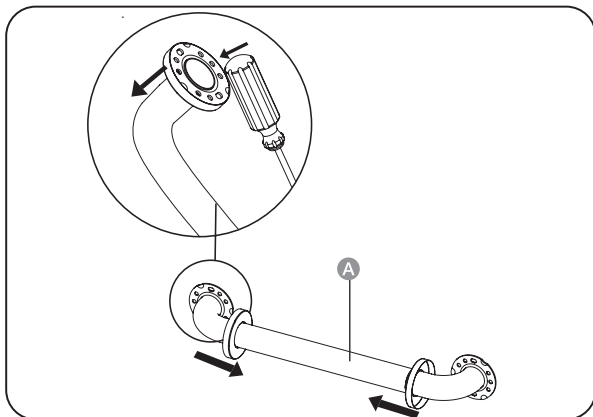


- **IMPORTANTE:** Recuerde montar todos los tornillos firmemente en un montante de madera. Utilice un detector de vigas para localizar el punto central del montante. La distancia entre los centros de los montantes es de unos 40,6 cm.
- Afloje las tapas de la barra de sujeción desde la base, girando y golpeando suavemente desde la parte inferior de la base de montaje.




Instalación

Paso 2:

Localizar Los Montantes y Colocar la barra de Sujeción

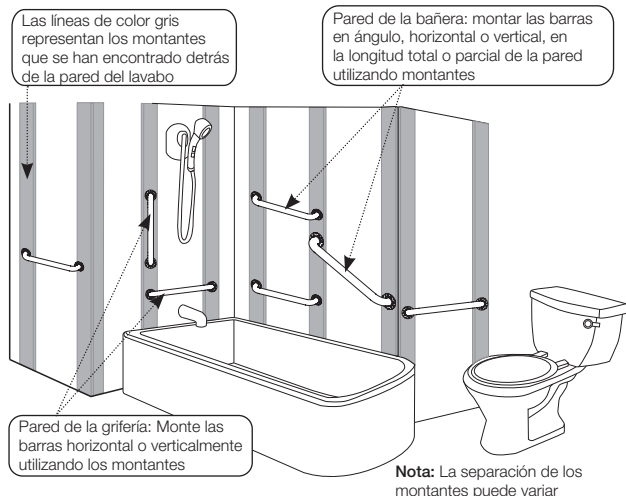

- Utilice un detector de vigas para localizar el punto central del montante. La distancia entre los centros de los montantes es de unos 40,6 cm.

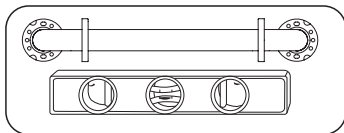

- Con un nivel, coloque la barra de sujeción en la pared, en la posición deseada. Asegúrese de que los orificios de montaje están situados en un montante de madera.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


日本語

中文

Instalación

Paso 3:


Marcar la Ubicación de Montaje

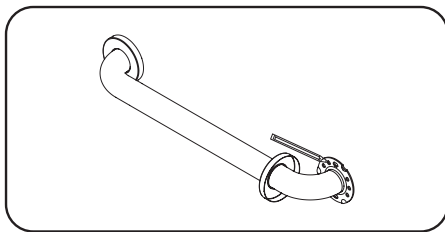

- Con un lápiz, marque la posición de los tornillos de montaje.

Paso 4:


Perforar Los Orificios de Los Tornillos de Montaje

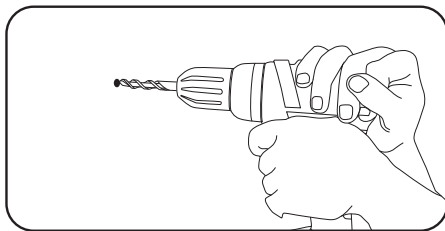

- Aparte la barra de sujeción y taladre los orificios guía como se marcaron con el lápiz.
- **IMPORTANTE:** Compruebe que los orificios se taladran en el montante de madera.



Paso 5: Montar la Barra de Sujeción

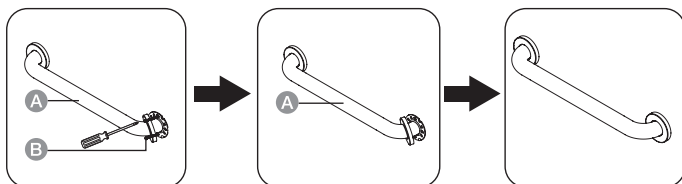

- Monte la barra de sujeción utilizando un tornillo Phillips. Asegúrese de que los tornillos se aprietan en un montante de madera.
- Deslice las tapas de la barra de sujeción por encima de las placas de montaje y estámpelas en su lugar. Si lo desea, aplique silicona sellante o masilla en la parte posterior de las tapas de la barra de sujeción para evitar la filtración de agua.

Información de Seguridad



- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, lea atentamente y comprenda toda la información de seguridad y las instrucciones incluidas en este manual. Si no comprende alguna información de seguridad o parte de las instrucciones de instalación, contacte con un profesional para obtener ayuda antes de intentar la instalación.
- **ADVERTENCIA:** Instale el producto solo de acuerdo con estas instrucciones de montaje. No intenten modificar o alterar este producto. Después de la instalación, compruebe su barra de sujeción periódicamente para asegurarse de que todos los tornillos están apretados. Vuelva a apretarlos si están flojos.
- **IMPORTANTE:** Monte la barra de sujeción en una superficie segura. El fabricante no aceptará la responsabilidad de ningún daño o lesión provocado por una falta de resistencia de la pared o por una instalación inadecuada.
- **ADVERTENCIA:** Todos los tornillos deben montarse directamente en un montante de madera. Localice la mitad del montante con un detector de vigas u otro método de detección (la distancia entre los centros de los montantes es de unos 40,6 cm).

Siga las instrucciones y los esquemas de la guía de instalación de AmazonBasics.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

中文

Especificaciones

B079LL22TC	30,5 cm	Diámetro 3,2 cm
B079LD8CRV	40,6 cm	Diámetro 3,2 cm
B079LL5FB2	45,7 cm	Diámetro 3,2 cm
B079LKHXTV	61 cm	Diámetro 3,2 cm
B079L7MRD9	76,2 cm	Diámetro 3,2 cm
B079LL4527	81,3 cm	Diámetro 3,2 cm
B079L9X9L4	91,4 cm	Diámetro 3,2 cm
B079L7MXTK	106,7 cm	Diámetro 3,2 cm
B079LKQNP	121,9 cm	Diámetro 3,2 cm
B079L9X9LJ	30,5 cm	Diámetro 3,8 cm
B079L7MRDY	40,6 cm	Diámetro 3,8 cm
B079L6LY1V	45,7 cm	Diámetro 3,8 cm
B079LL452W	61 cm	Diámetro 3,8 cm
B079LJZF95	76,2 cm	Diámetro 3,8 cm
B079LKNJT9	81,3 cm	Diámetro 3,8 cm
B079L9X9M4	91,4 cm	Diámetro 3,8 cm
B079L6LY25	106,7 cm	Diámetro 3,8 cm
B079L9TH6V	121,9 cm	Diámetro 3,8 cm

Información Sobre La Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



Visite amazon.de/basics-garantie

— o —



Póngase en contacto con Atención al cliente en el 0900 803 711

Comentarios

¿Le encanta? ¿No le gusta nada?

Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

Por favor, visite: amazon.es/review/review-your-purchases#



Para otros servicios:



Visite amazon.es/gp/help/customer/contact-us

— o —



Póngase en contacto con Atención al cliente en el 0900 803 711

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語


中文

ウェルカムガイド・日本語

障害者用バスルームグラブバー

内容：

スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください。

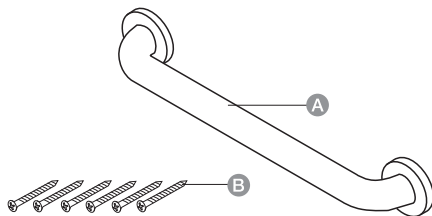


パーツ	説明	数量
A	グラブバー	1
B	取り付け用ネジ #10、5.1cm ステンレス	6

必要な道具		
	安全めがね	スタッドファインダー
	鉛筆	1/8" ドリルビット
	水準器	プラスドライバー
	電動ドリル	シリコンシーラント
	巻尺	

設置

ステップ 1:

グラブバーのカバーを外す

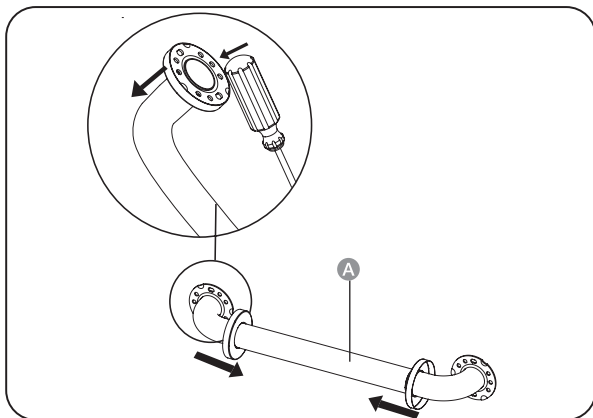


- **重要事項:** 全てのネジが間柱（まばしら）にしっかりねじ込まれていることを確認してください。間柱の中心を見つけるにはスタッドファインダーをご使用ください。間柱はそれぞれの中心が40.6cm離れているのが通常です。
- グラブバーカバーを静かに回し、マウンティングベースの下を軽くたたき事でベースから外します。




設置

ステップ 2:

間柱を見つけ、Grabバーの位置を決める

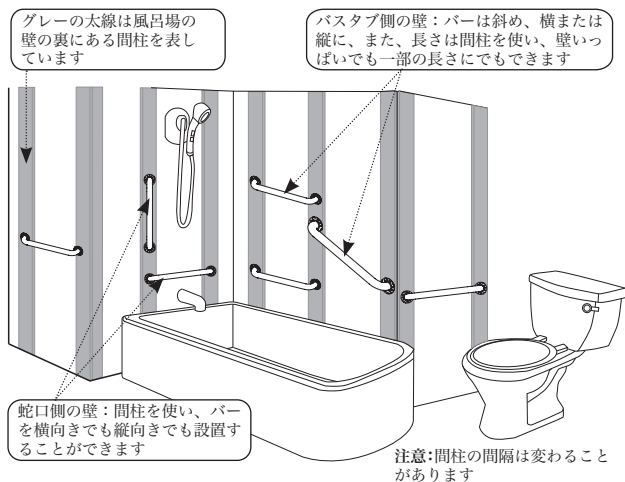

- 間柱の中心を見つけるにはスタッドファインダーをご使用ください。間柱はそれぞれの中心が40.6cm離れているのが通常です。

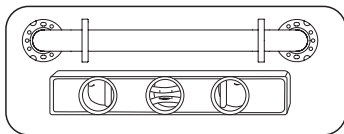


- 水準器を使用し、Grabバーを壁の望む場所に位置決めします。マウンティング用の穴が間柱の上に来るように注意します。

設置

ステップ 3:


マウンティング位置に印をつける

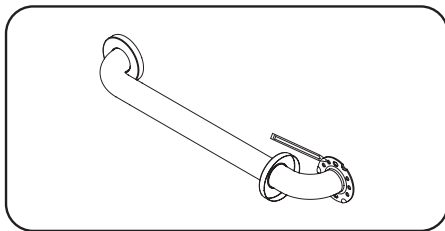

- 鉛筆を使用し、ネジをねじ込む位置に印をつけます。

ステップ 4:


ドリルでマウンティング用の穴をあける

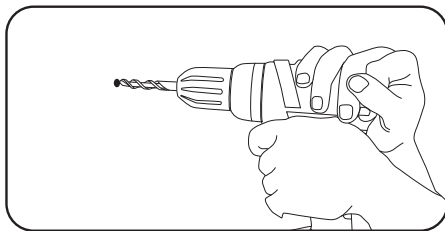

- グラブバーを横に置き、鉛筆で印をつけた位置に下穴をあけます。
- 重要事項：穴をあける際は間柱に空けるよう注意してください。



ステップ 5： Grabバーをマウントする

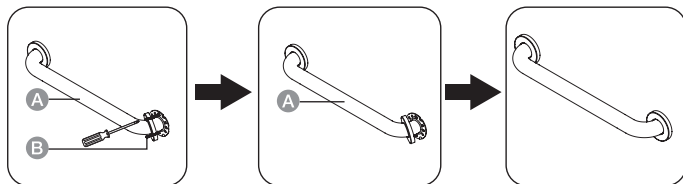

- プラスドライバーを使用してGrabバーをマウントします。ネジを間柱にしっかりねじ込むように注意します。
- Grabバーカバーをスライドさせてマウンティングプレートの上を覆うようにし、正しい位置にしっかりスナップさせます。必要であれば、水の浸透を防ぐためシリコンシーラントまたはコーキングをGrabバーカバーの裏にぬってください。

安全情報



- **警告：**怪我のリスクを減らすため、このマニュアルに記されている情報や指示をしっかりと読み、理解してください。安全情報や設置についての指示を全く理解できない場合は、取り付ける前にプロに連絡し、助力を求めてください。
- **警告：**設置はこれらの指示に従ってのみ行ってください。この製品を修正したり改造することはおやめください。設置後は定期的にバーをチェックし、すべてのネジがしっかりと締まっていることを確認してください。緩んでいれば正してください。
- **重要事項：**Grabバーのマウントはしっかりした面に対して行ってください。壁の強度不足や不適切な取り付けによる怪我やダメージについて、メーカーは責任を負いかねます。
- **警告：**全てのネジは間柱に直接しっかりとめられている必要があります。スタッドファインダーや他の間柱確認方を使って間柱の中心を突き止めます（間柱はそれぞれの中心が40.6cm離れているのが通常です）。

指示と共に、Amazonベーシック設置ガイドの線画に従ってください。

規格

B079LL22TC	30.5cm	直径 3.2cm
B079LD8CRV	40.6cm	直径 3.2cm
B079LL5FB2	45.7cm	直径 3.2cm
B079LKHXTV	61cm	直径 3.2cm
B079L7MRD9	76.2cm	直径 3.2cm
B079LL4527	81.3cm	直径 3.2cm
B079L9X9L4	91.4cm	直径 3.2cm
B079L7MXTK	106.7cm	直径 3.2cm
B079LKQNWPN	121.9cm	直径 3.2cm
B079L9X9LJ	30.5cm	直径 3.8cm
B079L7MRDY	40.6cm	直径 3.8cm
B079L6LY1V	45.7cm	直径 3.8cm
B079LL452W	61cm	直径 3.8cm
B079LJZF95	76.2cm	直径 3.8cm
B079LKNJT9	81.3cm	直径 3.8cm
B079L9X9M4	91.4cm	直径 3.8cm
B079L6LY25	106.7cm	直径 3.8cm
B079L9TH6V	121.9cm	直径 3.8cm

保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには：



ホームページ：amazon.jp/AmazonBasics/Warranty

- または -



カスタマーサービス **0120-899-276** にご連絡ください。

フィードバック

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？

カスタマーレビューでお知らせください。

Amazonベーシック は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを目指しています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。

レビューはこちらへ： amazon.jp/review/review-your-purchases#



更なるサービスについては：



こちらのリンクへ amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

- または -




カスタマーサービス **0120-899-276** にご連絡ください。

浴室无障碍扶手

内装物:

在开始组装之前, 确保包装内包含以下组件:

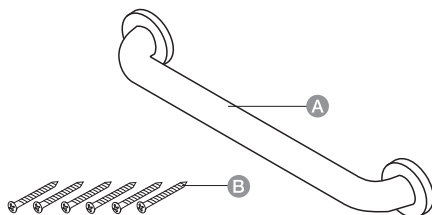

部件	描述	数量
A	扶手	1
B	安装螺丝 #10 x 5.1 厘米, 不锈钢	6


所需工具

	安全眼镜		寻柱机
	铅笔		1/8 英寸钻头
	水平仪		十字螺丝刀
	电钻		硅密封剂
	测量尺		

安装

步骤 1:

移开扶手盘盖

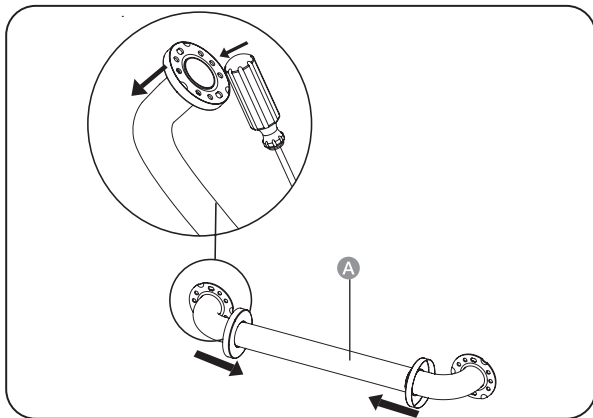


- 重要：谨记将所有螺丝牢固安装于木质柱体上。使用寻柱机定位柱体的中心点。柱体中心点通常间隔 40.6 厘米。
- 从安装底盘的底部轻转并轻拍扶手盘盖，将其从底盘上旋松。




安装

步骤 2:

定位柱体和放置扶手

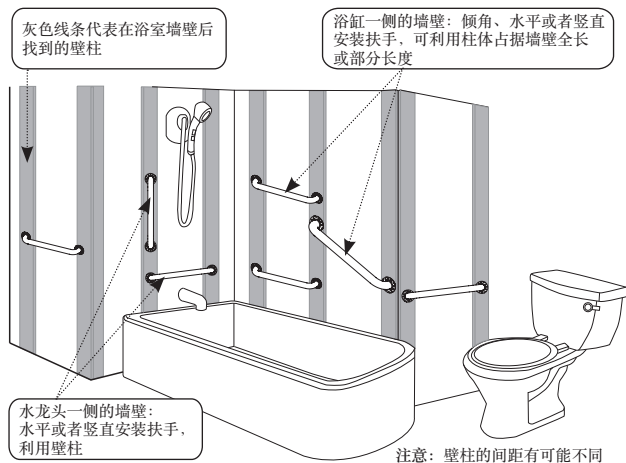

- 使用寻柱机定位柱体的中心点。柱体中心点通常间隔 40.6 厘米。

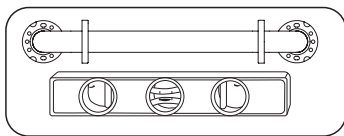


- 使用水平仪，将扶手放置于墙体上的预定位置。确保安装孔定位于木质柱体上。

安装

步骤 3:


标志安装位置

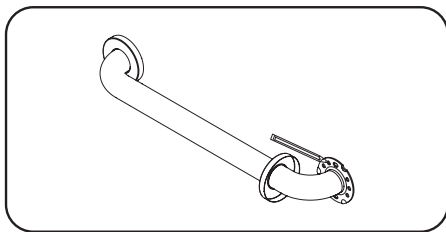

- 使用铅笔标志螺丝的安装位置。

步骤 4:


钻螺丝安装孔

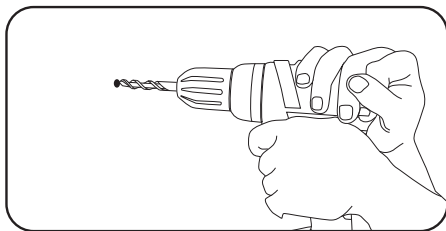

- 将扶手放到一旁，根据用铅笔标志的位置钻引导孔。
- 重要：确保孔被打入木质柱体。



步骤 5: 安装扶手

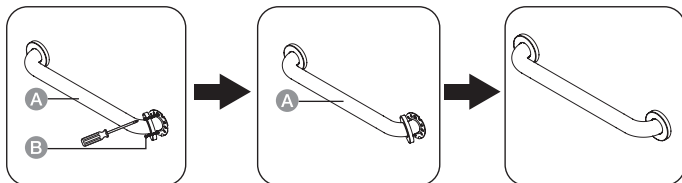

- 使用十字螺丝刀安装扶手。确保螺丝被紧紧拧入木质柱体内。
- 将扶手盘盖覆于安装盘上并咬合到位。如果需要，在扶手盘盖的背面应用硅密封胶或者填缝材料以防止水渗入。

安全信息



- **警告：**为减少受伤风险，仔细阅读并理解此手册里提供的所有安全信息和指导说明。如果您不理解安全信息或者安装指导里的任何部分，请在尝试安装前联系专业人士协助。
- **警告：**仅遵从这些指导说明进行安装。勿尝试改动或改造本产品。安装后，定期检查您的扶手确保所有螺丝紧固。如有松动，重新拧紧。
- **重要：**在稳固表面安装扶手。生产商对由于墙壁承受力不足或者非正确安装而造成的任何伤害或损坏不承担责任。
- **警告：**所有螺丝必须被直接且紧固地安装于木质柱体上。使用寻柱机或者其它柱体找寻方式定位柱体中部（柱体中心点通常间隔 40.6 厘米）。

参照亚马逊倍思安装指导内的线图指导说明。

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

中文

规格

B079LL22TC	30.5 厘米	直径 3.2 厘米
B079LD8CRV	40.6 厘米	直径 3.2 厘米
B079LL5FB2	45.7 厘米	直径 3.2 厘米
B079LKHXTV	61 厘米	直径 3.2 厘米
B079L7MRD9	76.2 厘米	直径 3.2 厘米
B079LL4527	81.3 厘米	直径 3.2 厘米
B079L9X9L4	91.4 厘米	直径 3.2 厘米
B079L7MXTK	106.7 厘米	直径 3.2 厘米
B079LKQNPW	121.9 厘米	直径 3.2 厘米
B079L9X9LJ	30.5 厘米	直径 3.8 厘米
B079L7MRDY	40.6 厘米	直径 3.8 厘米
B079L6LY1V	45.7 厘米	直径 3.8 厘米
B079LL452W	61 厘米	直径 3.8 厘米
B079LJZF95	76.2 厘米	直径 3.8 厘米
B079LKNJT9	81.3 厘米	直径 3.8 厘米
B079L9X9M4	91.4 厘米	直径 3.8 厘米
B079L6LY25	106.7 厘米	直径 3.8 厘米
B079L9TH6V	121.9 厘米	直径 3.8 厘米

保修信息

如需获得此产品的保修信息：



访问 amazon.cn/AmazonBasics/Warranty

— 或 —



拨打 **400-810-5666** 联系客服人员

反馈

喜欢这款产品？不喜欢这款产品？

让我们通过客户评论了解您的想法和意见。

亚马逊倍思以客户为导向，致力于供应满足客户高标准的产品。我们邀请您填写评论，分享您使用产品的体验。

请访问：amazon.cn/review/review-your-purchases



如需更多服务：



访问 amazon.cn/gp/help/customer/contact-us

— 或 —



拨打 400-810-5666 联系客服人员

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

中文



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA